




Endo
Easy
Efficient

A close-up photograph of a dentist wearing a white surgical mask and blue scrubs, holding a white ultrasonic scaler (EDDY) in their gloved hand. The background is blurred, showing a dental clinic setting.

EDDY®
**Die schallaktivierte
Spülinnovation**

Anwendung
Schritt für
Schritt

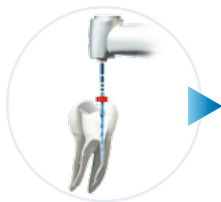

Aufbereitung

Den Kanal auf mindestens ISO 25 mit Taper von .06 aufbereiten.



Spülung

1. EDDY® von Hand im Uhrzeigersinn in das Airscaler-Handstück eindrehen, bis der Widerstand leicht zunimmt.



2. Pulkakammer mit geeigneter Endo-Spüllösung füllen, z. B. mit NaOCl-Lösung, EDTA.
3. Die EDDY® Spülspitze in den aufbereiteten Wurzelkanal einführen, dabei den Airscaler nicht aktivieren.
4. Im Falle eines offenen Apex sicherstellen, dass die EDDY® Spülspitze nur bis max. 1 mm vor den Apex eingeführt wird.

Schritt für Schritt

Wichtig:

Den Airscaler erst aktivieren, nachdem die EDDY® Spitze in den Kanal eingeführt ist.

Den Airscaler deaktivieren, bevor die EDDY® Spitze aus dem Kanal entfernt wird.

Airscaler **ON**



5. Sobald die EDDY® Spülspitze eingeführt ist, den Airscaler bis zu 30 Sekunden aktivieren und dabei EDDY® mit vertikalen Bewegungen vorsichtig auf- und abbewegen.

6. Üben Sie keinen zusätzlichen Druck mit der Hand aus.

7. Falls ein Widerstand zu spüren ist, die Spülung abbrechen.

Airscaler **OFF**




8. Den Airscaler deaktivieren, bevor Sie die EDDY® Spülspitze aus dem Wurzelkanal entfernen.

9. Die Spülung mit EDDY® nach jedem Aufbereitungsschritt wiederholen.



10. Nach der Spülung: EDDY® von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

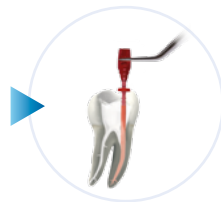

Obturation

Kanal trocknen und verschließen.



VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15

81737 München

Tel. +49 (0)89 62734-0

Fax +49 (0)89 62734-304

info@vdw-dental.com

