



Endo
Easy
Efficient



**EDDY
FLEX.CANNULA™
Spülkanüle**

Schritt-
für-Schritt
Anleitung



Vorbereitung

Verpackung durch Ziehen entlang der dafür vorgesehenen, vorgeschrittenen Kerbe öffnen.

Step by Step



Spülung

1. Befüllen einer Luer-Lock-Spritze mit einer kompatiblen Spülflüssigkeit: stabilisiertes Natriumhypochlorit bis zu 6%, EDTA 17% oder Chlorhexidindigluconat 2%.
2. Den mit „Secure Lock“ gekennzeichneten Teil der Kanüle an den „männlichen“ Anschluss einer **zuvor gefüllten** Luer-Lock-Spritze anschließen und die Kanüle durch Drehen verriegeln.
3. Sicherstellen, dass die Spülkanüle in der Spritze fest verriegelt ist.
4. Die Länge des zu spülenden Wurzelkanals überprüfen und anhand der Längenmarkierung 18, 19, 20 und 22 mm die korrekte Positionierung der Kanüle gewährleisten.




5. Spülkanüle vorsichtig in die Kanalöffnung einbringen und mit der Spülung am koronalen Eingang beginnen. Führen Sie die Spülkanüle tiefer in den Kanal ein, bis die koronalen 2/3 des Kanals ausgiebig gespült werden können.
Den Kanal mit einer kontinuierlichen Hin- und Herbewegung spülen.



Aktivierung der Spülung

Die schallaktivierte Spülspitze EDDY® verwenden, um die Wirksamkeit der Desinfektionslösung zu erhöhen.

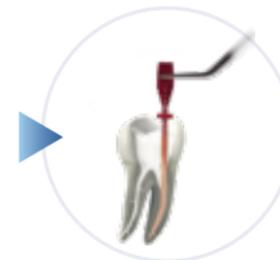

Obturation

Kanal trocknen und obturieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

Sicherstellen, dass sich die Spülkanüle frei bewegen kann, um einen konstanten Rückfluss der Spülflüssigkeit zu gewährleisten. Das Produkt wird im Reinzustand hergestellt und ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch nicht sterilisieren. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.



Endo
Easy
Efficient

Distributed by:

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15
81737 Munich
Germany
Tel +49 (0) 89 62734-0
Fax +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18,
1800 Vevey, Switzerland
pd-dental.com