


GUTTA FUSION®

Warme 3D-Obturation mit System




Auch mit
speziellen
Obturatoren für
RECIPROC®

Innovation heißt, **Vorteile verbinden**

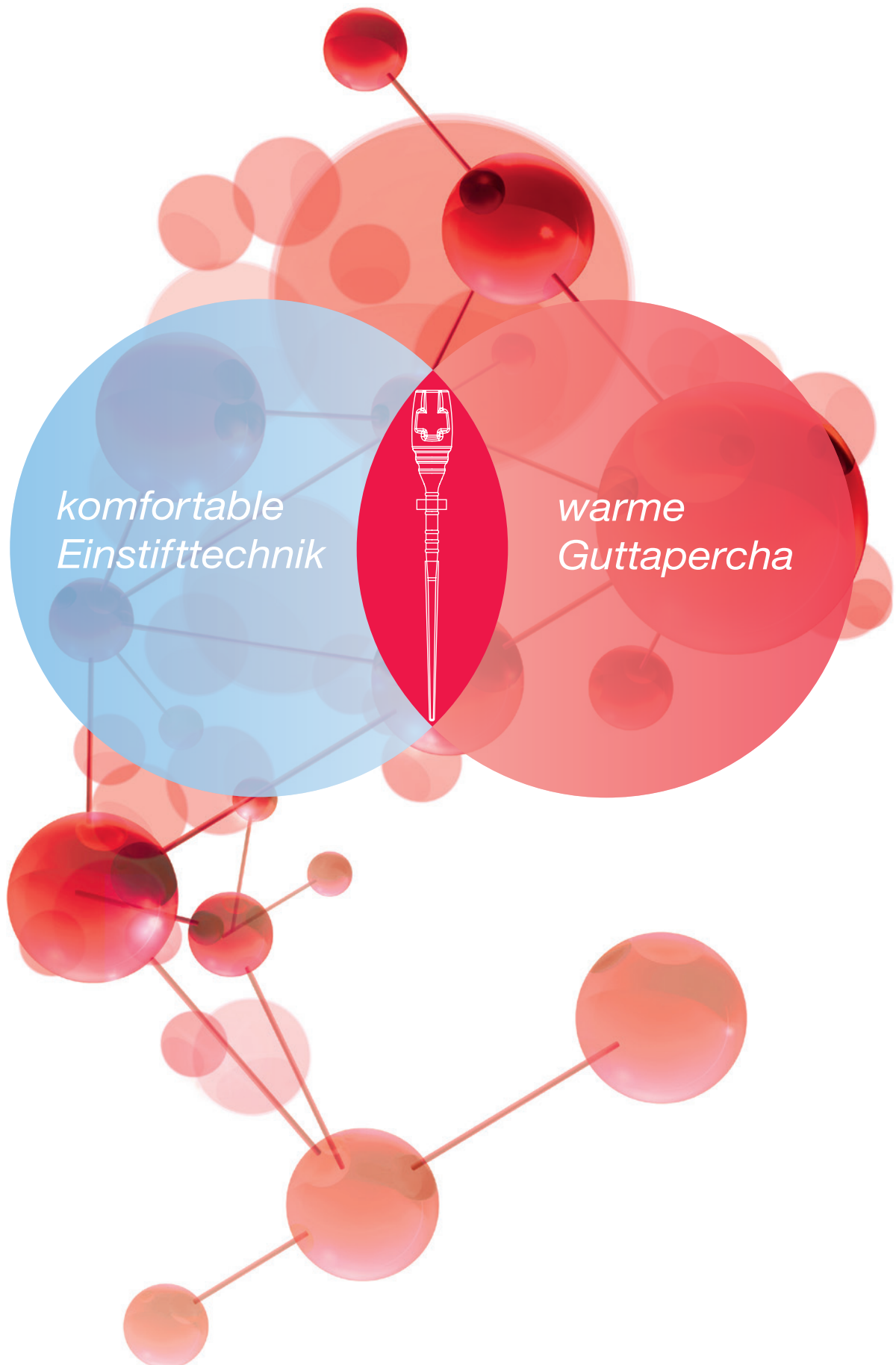

Obturator komplett aus Guttapercha

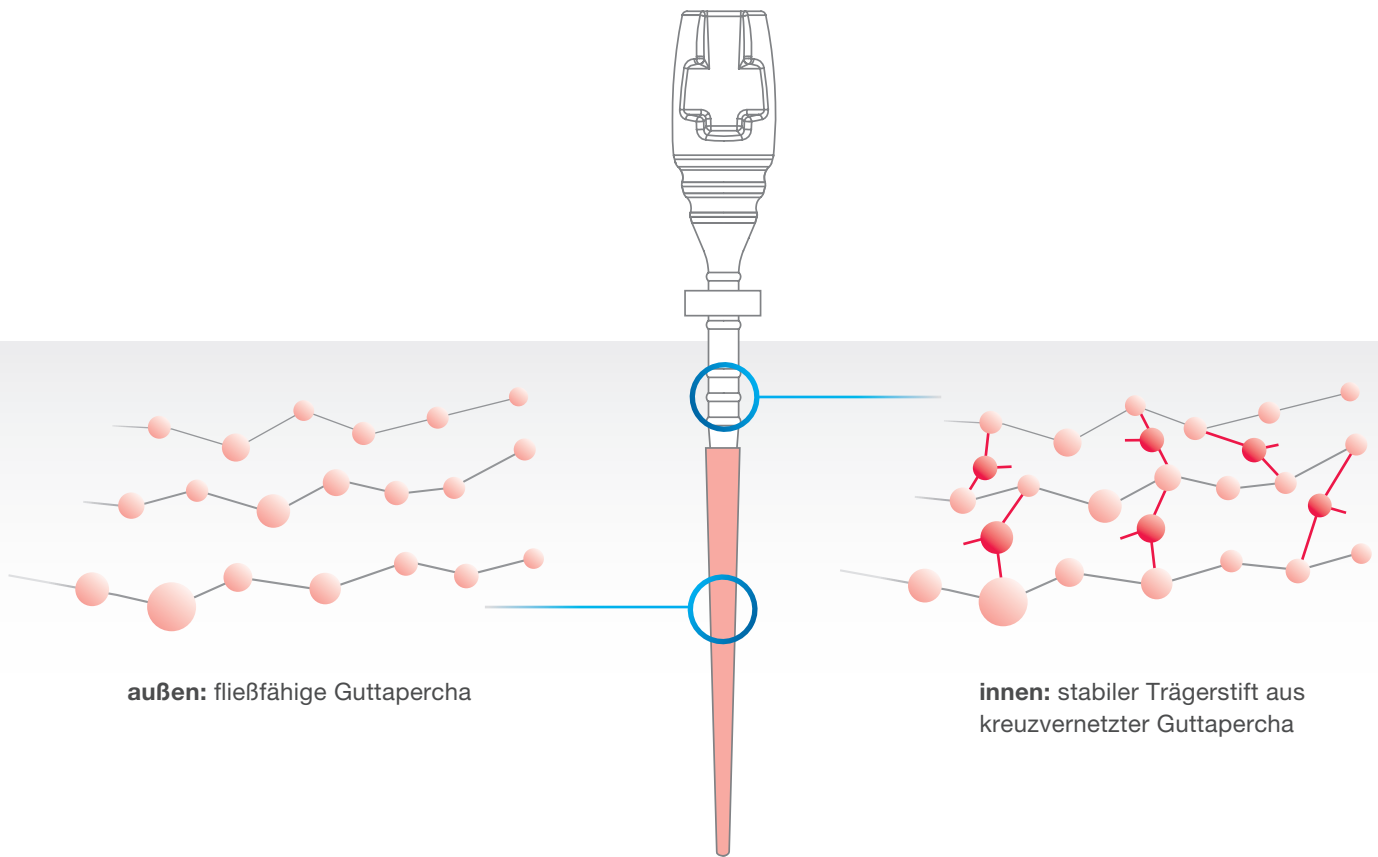

Innen geben kreuzvernetzte Polymerketten dem Träger Stabilität. Außen ummantelt fließfähige Guttapercha den Träger. Die erwärmte fließfähige Guttapercha wird durch den Träger in das gesamte Wurzelkanalsystem kondensiert. Die positiven Eigenschaften der Guttapercha bleiben erhalten.

Warme 3D-Füllung – ohne Kompromisse


- **Homogene Füllung** des gesamten Wurzelkanalsystems durch exzellente Kondensation der warmen Guttapercha in Ramifikationen und Isthmen

- **Gezieltes Applizieren** des Obturators auch in Molaren durch speziell entwickelten Pinzettengriff möglich

- **Einfaches Abtrennen** des Griffes ohne Zusatzinstrumente


- **Müheloses Ausbohren** der Guttapercha für die Stiftbettpräparation

- **Schnelle Revision** dank Guttaperchaträger

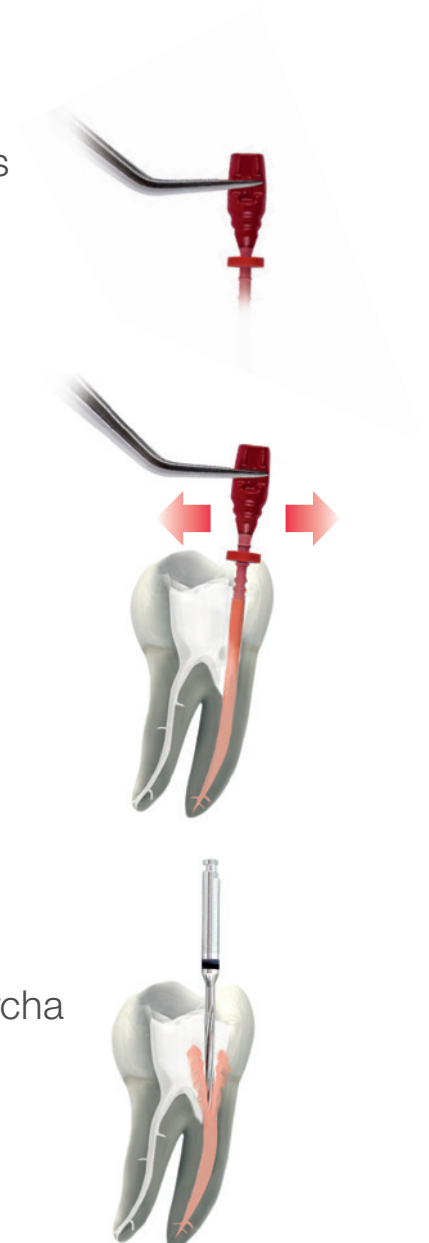


Überzeugend im Ergebnis

- Wandständige und homogene Füllung

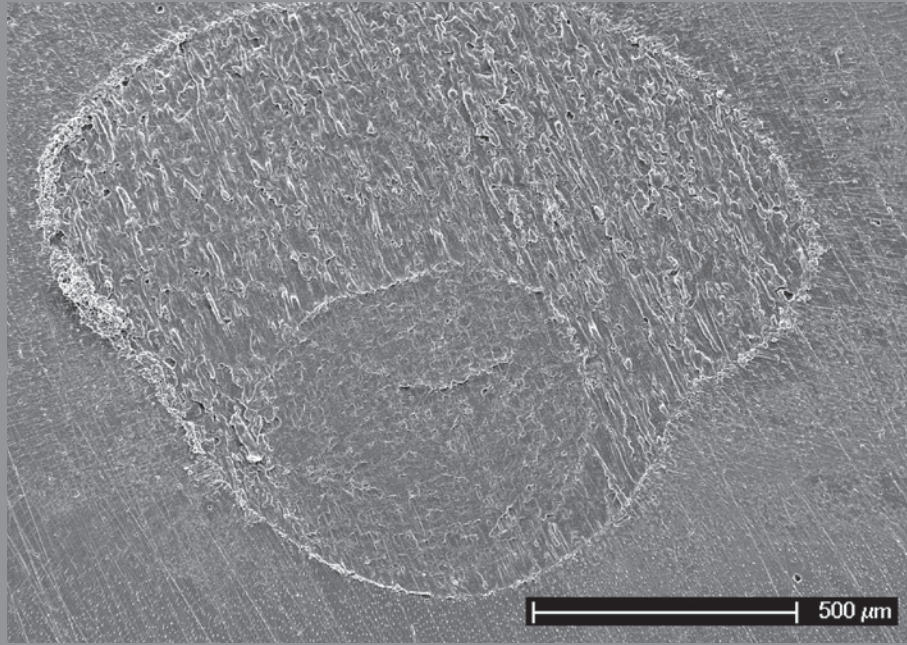

▲ Eine vollständige und homogene Füllung des Wurzelkanals mit GUTTAFUSION® und dünner Sealerschicht, 8 mm vor Arbeitslänge
Quelle: Dr. F. Tay, Georgia Regents University, Augusta, Georgia, USA

- Gute Behandlungskontrolle

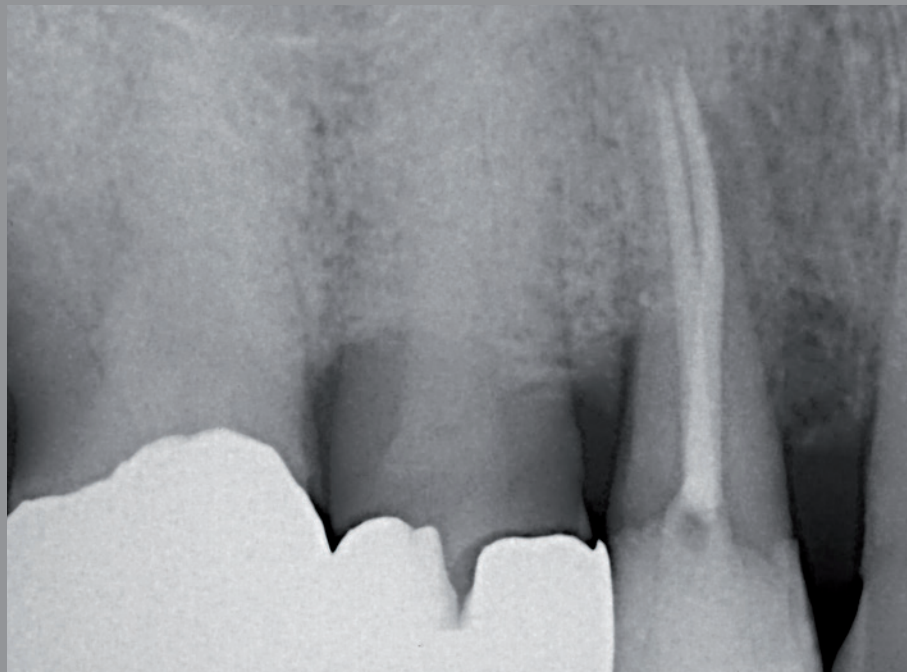

▲ Dichte 3D-Wurzelkanalfüllung mit GUTTAFUSION® (Zahn 14)
Quelle: Dr. med. dent. R. Schlichting, Passau

Einfach in der Anwendung


Sicher

Die Pinzettenführung am Griff ermöglicht ein präzises Einführen des Obturators in den Wurzelkanal. Besonders im molaren Bereich kann das Abstreifen von Guttapercha verhindert werden.*




Effizient

100% der befragten Zahnärzte finden das Füllen mit GUTTA-FUSION® zeitsparender als die laterale Kondensation.*

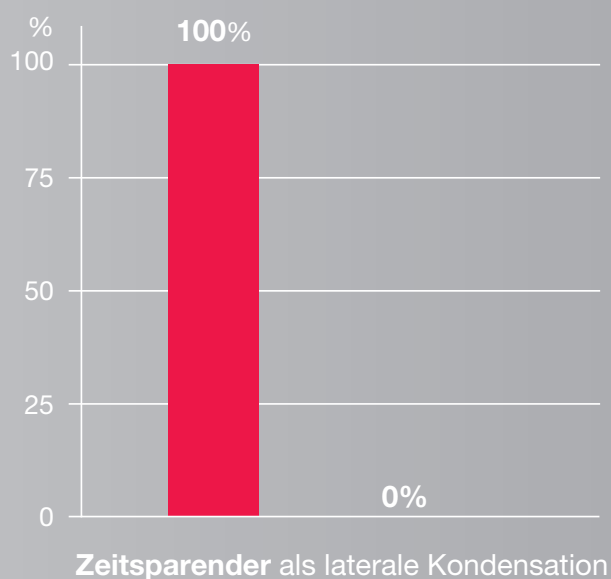

Angenehm

Mehr als 90% der befragten Zahnärzte finden das Füllen mit GUTTA-FUSION® angenehmer als die laterale Kondensation.*

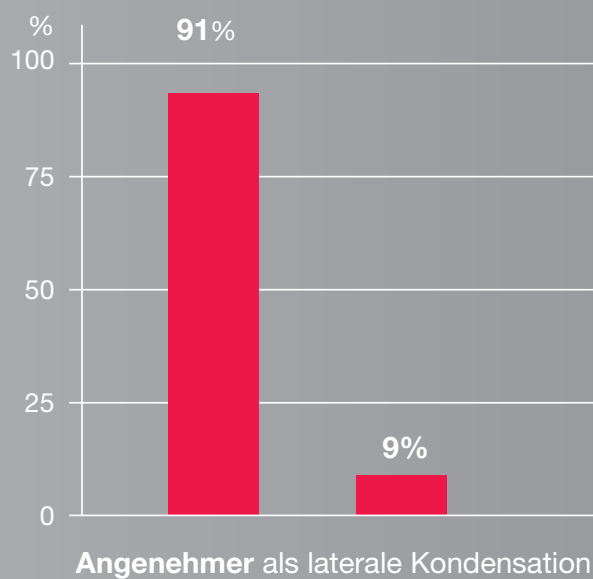

* Quelle: Interne Daten, VDW München, 2012

Schritt für Schritt

1.

Obturator wählen

GUTTAFUSION®



mit Hilfe des Size Verifiers

GUTTAFUSION® for RECIPROC®*



ohne Size Verfier



*speziell auf RECIPROC®
abgestimmte Obturatoren
in den Größen R25, R40
und R50

... zur erfolgreichen warmen 3D-Füllung

2.

Obturator erwärmen



3.

Sealer applizieren




4.

Wurzelkanal füllen



5.

Träger und Griff abtrennen

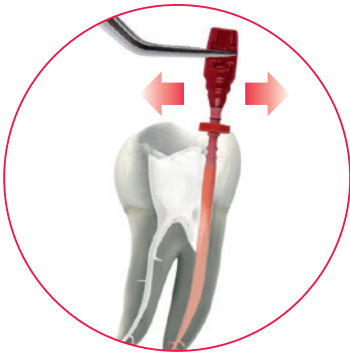

6.

Guttaperchaüberschüsse entfernen



7.

Stiftbettpräparation (optional)



GUTTAFUSION® Ofen

- ✓ Erhitzt Obturatoren sekundenschnell
- ✓ Erwärmt zwei Obturatoren gleichzeitig
- ✓ Erhitzt alle GUTTAFUSION® Obturatoren auf Stufe 1
- ✓ Optische und akustische Signalhinweise
- ✓ Kontrolliert ausfahrende Obturatorenhalter
- ✓ Einfaches Reinigen durch speziellen Modus



GUTTAFUSION® Produktpalette

GUTTAFUSION® Obturatoren

Blister à 6 Obturatoren		1 Blister	5 Blister
20	●	V04 1541 000 020	V04 1542 000 020
25	●	V04 1541 000 025	V04 1542 000 025
30	●	V04 1541 000 030	V04 1542 000 030
35	●	V04 1541 000 035	V04 1542 000 035
40	●	V04 1541 000 040	V04 1542 000 040
45	○	V04 1541 000 045	-
50	●	V04 1541 000 050	-
55	●	V04 1541 000 055	-



GUTTAFUSION® Size Verifier

Blister à 6 Verifier		1 Blister
20	●	V04 1508 000 020
25	●	V04 1508 000 025
30	●	V04 1508 000 030
35	●	V04 1508 000 035
40	●	V04 1508 000 040
45	○	V04 1508 000 045
50	●	V04 1508 000 050
55	●	V04 1508 000 055
25-35		V04 1508 000 305



REF

■ GUTTAFUSION® Basic Kit for Mtwo®

V04 1540 000 000

- 2 x Blister à 6 GUTTAFUSION® Obturatoren Größe 25
- 1 x Blister à 6 GUTTAFUSION® Obturatoren Größe 30
- 1 x Blister à 6 GUTTAFUSION® Obturatoren Größe 35
- 1 x Blister à 6 GUTTAFUSION® Size Verifier Sortierung, Größen 25, 30, 35
- Obturations-Übungsblock passend für GUTTAFUSION® Obturatoren Größe 25
- 1 x Mtwo® Papierspitzen sortiert, Größen 25/.06, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07, steril
- Anwenderkarte, Gebrauchsanweisung



GUTTAFUSION® for RECIPROC® Obturatoren

Blister à 6 Obturatoren		1 Blister	5 Blister
R25	●	V04 1531 000 025	V04 1532 000 025
R40	●	V04 1531 000 040	V04 1532 000 040
R50	●	V04 1531 000 050	V04 1532 000 050



■ GUTTAFUSION® for RECIPROC® Basic Kit

- 3 x Blister à 6 GUTTAFUSION® for RECIPROC® Obturatoren R25
- 1 x Blister à 6 GUTTAFUSION® for RECIPROC® Obturatoren R40
- 1 x Blister à 6 GUTTAFUSION® for RECIPROC® Obturatoren R50
- Obturations-Übungsblock passend für GUTTAFUSION® for RECIPROC® Obturatoren R25
- 1 x RECIPROC® Papierspitzen sortiert, Größen R25, R40, R50, steril
- Anwenderkarte, Gebrauchsanweisung

REF

V04 1530 000 000



■ GUTTAFUSION® Ofen

Ofen zur sekundenschnellen Erwärmung von zeitgleich bis zu zwei Obturatoren.

- Erhitzen der GUTTAFUSION® Obturatoren in weniger als 1 Minute
- Optische und akustische Signalhinweise
- Kontrolliert ausfahrende Obturatorenhalter
- Einfaches Reinigen durch speziellen Modus
- Benutzerfreundlich

M00 GUFS 000 000

230 V





VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15 • 81737 München • Deutschland
Tel. +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com • info@vdw-dental.com